



Bellovac® ABT
YOUR OWN BLOOD™

OPPSTART

Pakningen åpnes aseptisk.

Sett kateteret på plass. Ta bort troakaren, fiksér kateteret og fest kateteret til innløpsslangen.

1. For å evakuere luft fra operasjonsområdet, steng klemmen på innløpsslangen.
2. Press sammen sugeskilden.






3. Klemmen på innløpsslangen åpnes igjen. Gjenta prosedyren til blodet begynner å renne, eller til sugeskilden forblir sammentrykt.
3. Steng klemmen på utløpsslangen.

Hvis staseslange brukes: For å unngå koagulering, lukkes klemmen på innløpsslangen etter siste kompresjon av sugeskilden. Ca. 15 minutter etter at stasen er opphevet, gjenåpnes klemmen.

5. Fjern beskyttelseshetten på poseinnløpet.

6. Fest autotransfusjonsposen på sugeskildens utløpsslange ved hjelp av skrukoblingen.
7. Merk posen med pasientens identitet, tidspunkt da oppsamlingen startet og fastsatt tid for når oppsamlingen skal avsluttes (maksimum seks timer etter avsluttet operasjon).

8. Heng Bellovac ABT i en rett opp/ned stilling, gjerne med medfølgende opphengsbånd. Transfusjonssettet sendes sammen med pasienten til postoperativ avdeling.

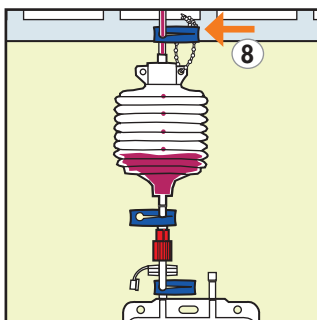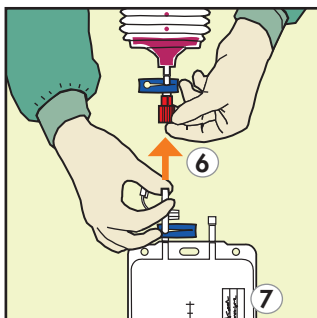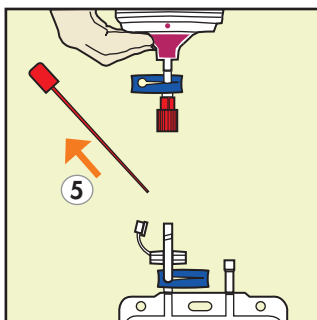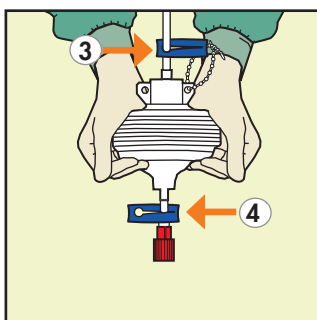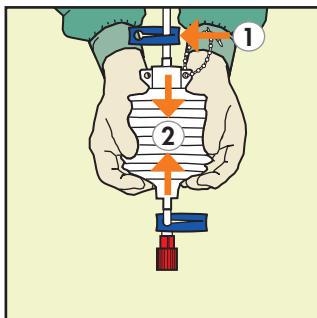

OPPSTART





OPPSAMLING AV BLOD

Oppsamling av blod

Kontrollér at autotransfusjonsposen er ordentlig merket med pasientens identitet, tidspunkt for oppstart av oppsamlingen og fastsatt tid for når oppsamlingen skal avsluttes.




1. Når innholdet i sugeskilden skal tømmes over i autotransfusjonsposen, stenger man sugeskildens innløpsklemme.
2. Åpne klemmen på utløpsslangen.
3. Press sugeskilden langsomt sammen med håndflatene, slik at blodet renner over i posen.
4. Steng klemmen på utløpsslangen.
5. Slipp sugeskilden og åpne klemmen på innløpslangen slik at dreneringen fortsetter.

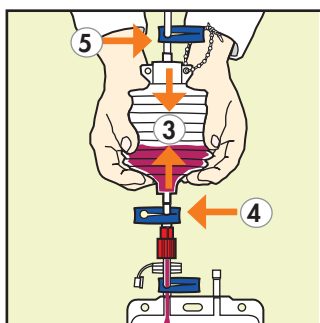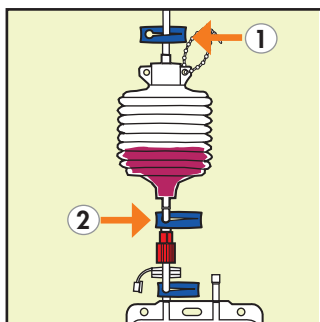

Bytte av pose

Påse at sugeskildens utløpsklemme er stengt.

6. Steng klemmen på posens innløp.
7. Fjern den fylte autotransfusjonsposen.
8. Sett på beskyttelseshetten som er festet til poseinnløpet.
9. Fest en ny pose ved å skru fast koblingsskruen. Påse at kontaminasjon forhindres.
10. Merk den nye posen med de samme tidene og pasientdata som den forrige posen, samt nytt posenummer.
11. Etter seks timers (maksimum) blodoppsamling, må autotransfusjonsposen byttes ut med en standard Astra Tech utbyttepose. Samme prosedyre (som under punkt 9 over) anvendes ved bytte til en Astra Tech utbyttepose.

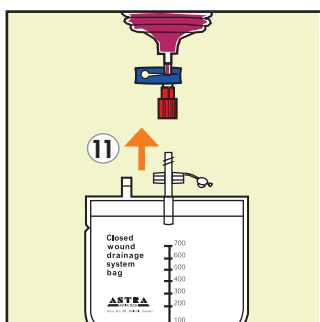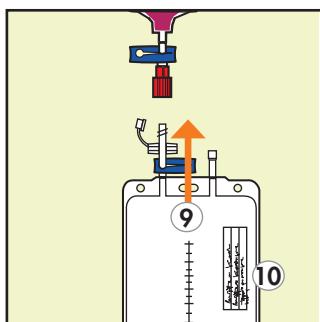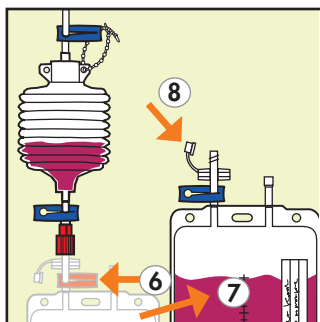



REINFUSJON

Transfusjonssettet åpnes aseptisk.

1. Sett slangeklemmen på transfusjonssettet tett inntil dråpekammeret og steng.
2. Fjern beskyttelsen fra både spissen på autotransfusjonssettet og autotransfusjonsposens utløp.
3. Stikk spissen på autotransfusjonssettet inn i autotransfusjonsposens utløp.

For å evakuere eventuell luft fra autotransfusjonsposen og fylle filteret og dråpekammeret:

4. Snu transfusjonssettet og posen opp ned.
5. Åpne slangeklemmen.
6. Klem forsiktig på autotransfusjonsposen (filteret og dråpekammeret fylles baklengs).
7. Fyll opp til merket på dråpekammeret.
8. Lukk slangeklemmen og påse at nivået opprettholdes i dråpekammeret.






9. Heng autotransfusjonsposen på IV-stativet.

10. Åpne slangeklemmen forsiktig og evakuer all luft fra transfusjonsslangen.

Merk: Transfusjonsslangen må ikke være tilkoblet pasientens venepunksjonskanyule mens luft evakueres.

11. Lukk slangeklemmen.
12. Fjern beskyttelseshetten fra transfusjonsslangen.

Koble transfusjonsslangen til pasientens venepunksjonskanyule. Juster slangeklemmen for å starte reinfusjonen.

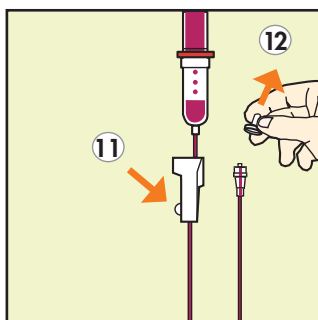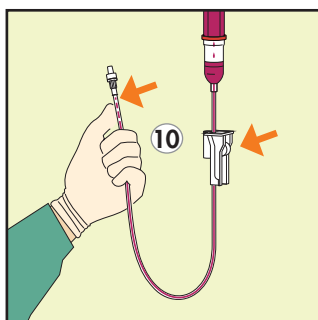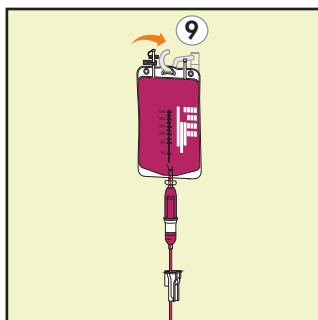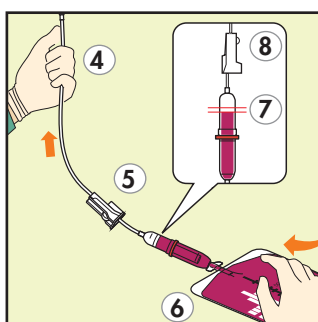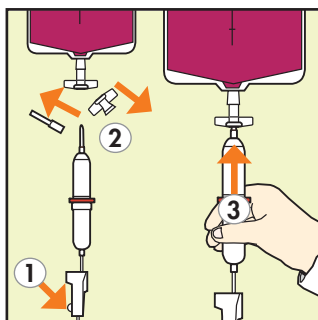



Bellovac® ABT
YOUR OWN BLOOD™

FORLENGESSESLANGE

Forlengesslangen anvendes for å forlenge avstanden mellom utløpet på Bellovac ABT og autotransfusjonsposen. Forlengesslangen kan anvendes dersom man ønsker at blodet forblir i et lukket kretsløp (av religiøse grunner) under oppsamling og reinfusjon.

Montering

Følg prosedyren fra punkt 1-4 i bruksanvisningen for oppstart. Koble deretter forlengesslangens innløp til sugekilden ved hjelp av skrukoblingen. Fjern beskyttelsen fra autotransfusjonsposen og koble posen til forlengesslangens utløp ved hjelp av skrukoblingen. Fortsett så oppstartsprosedyren med punkt 7. Hvis transfusjonssettet skal kobles til venepunksjonskanylen før dette fylles med blod, må transfusjonssettet først fylles med isoton saltvannsoopløsning.

Blodoppsamling





La begge klemmene på forlengesslangen være åpne og arbeid med klemmene på inn- og utløpslangen på sugekilden, beskrevet på instruksjonen for oppsamling av blod & bytte av pose.

Reinfusjon

Påse at følgende klemmer er lukket før reinfusjonen starter: Utløpsklemme på sugekilden, inn- og utløpsklemmene på forlengesslangen og innløpsklemmen på posen. Følg nøye bruksanvisningen for reinfusjon.

Bytte av pose og forlengesslange

Dersom man ønsker ytterligere oppsamling av blod og reinfusjon, må forlengesslangen, autotransfusjonsposen og transfusjonssettet byttes. For å forhindre at blodet kobles fra kroppen (av religiøse årsaker), startes retransfusjonen før man bytter forlengesslangen og transfusjonsposen. På denne måten vil blodet alltid være i kontakt med kroppen. Påse at utløpsklemmen på sugekilden er lukket. Steng innløps- og utløpsklemmene på forlengesslangen, og innløpsklemmen på posen. Koble fra den brukte forlengesslangen, autotransfusjonsposen og transfusjonssettet og monter nytt etter prosedyrene for montering.

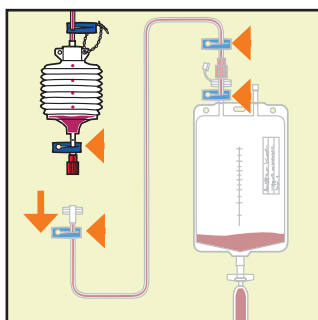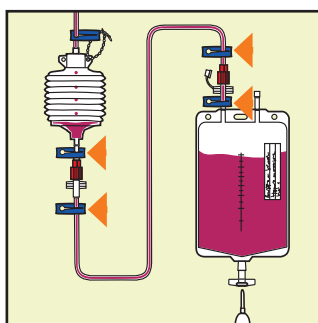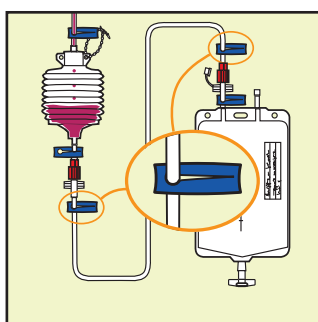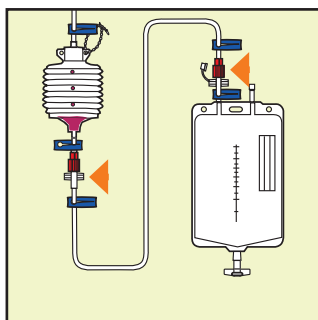

FORLENGESSESLANGE



Bellovac® ABT
YOUR OWN BLOOD™

Bellovac ABT produktsortiment

Bellovac® ABT sett

- Ref. nr 68396 Bellovac® ABT sett FG 10 med troakar
Ref. nr 68397 Bellovac® ABT sett FG 14 med troakar
Ref. nr 68398 Bellovac® ABT sett FG 18 med troakar

Bellovac® ABT tilbehør

- Ref. nr 68376 Y-kobling og kateter FG 10
Ref. nr 68385 Y-kobling og kateter FG 10 med troakar
Ref. nr 68377 Y-kobling og kateter FG 14
Ref. nr 68386 Y-kobling og kateter FG 14 med troakar
Ref. nr 68378 Y-kobling og kateter FG 18
Ref. nr 68387 Y-kobling og kateter FG 18 med troakar
Ref. nr 68379 Extraset (autotransfusjonspose og transfusjonssett)
Ref. nr 68380 Forlengesslange
Ref. nr 68381 Transfusjonssett
Ref. nr 68337 Astra Tech utbyttepose – PVC fri

CE 0088

STERILE EO



Manufactured by: Astra Tech AB, Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sverige
Tel: +46 31 776 30 00. Fax: +46 31 776 30 10
Internet: www.astratech.com

ASTRA
ASTRATECH



A company in the
AstraZeneca Group

Astra Tech AS, Postboks 160, 1471 Lørenskog.
Tlf: 67 92 05 50. Faks: 67 92 05 60. www.atratech.no